



MODELLO DAFNE

Leggere le istruzioni prima dell'uso della poltrona

MODELLO DAFNE

VI RINGRAZIAMO PER IL VOSTRO ACQUISTO.
LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA
POLTRONA E CONSERVARLO IN LUOGO SICURO.

Content

CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	1
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	1
INSTALLAZIONE.....	5
DEFINIZIONE PARTI ESTERNE.....	7
TELECOMANDO	8
ISTRUZIONI OPERATIVE E ILLUSTRAZIONE FUNZIONI.....	12
DOMANDE FREQUENTI E SOLUZIONE PROBLEMI.....	14
PARAMETRI TECNICI	14
SCHEMA DELLE PARTI MECCANICHE.....	15
LISTA DELLE PARTI MECCANICHE.....	16







conservare il presente manuale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI




- 1. Il meccanismo posto sullo schienale può effettuare differenti tipi di massaggio: rullante, avvolgente, picchiettante con pugno e con dita. Il massaggio può raggiungere collo, spalle e schiena. Consente di alleviare la fatica giornaliera e promuove la circolazione del sangue
- 2. Il massaggio degli airbag posti sulla pediera e seduta permette di migliorare la circolazione del sangue e alleviare la fatica;
- 3. La funzione di riscaldamento presente sulla pediera e seduta permette di alleviare la fatica e aiuta la circolazione sanguigna;
- 4 La pediera è formata da 2 sezioni che si possono allungare o ritirare di 10 cm per adattarsi a persone con differente altezza;
- 5. Design rinnovato
- 6. Telecomando con schermo lcd;
- 7. Possibilità di muovere pediera e schienale in modo indipendente;
- 8. Nuovo motore massaggiante;

Istruzioni di sicurezza




- Leggere il presente manuale prima dell'installazione e dell'utilizzo.
- Ci sono 2 tipi di segnali di sicurezza ATTENZIONE e CAUTELA. Staccare la corrente in caso di mancato utilizzo
- Assicurarsi che l'interruttore sia su OFF prima di inserire la spina nella rete elettrica





	ATTENZIONE	segnale che indica possibilità di ferirsi	
	CAUTELA	segnale che indica cautela nello svolgere operazioni	
	Segnale che indica un comportamento non corretto		non smontare da soli
	Seguire le istruzioni		corretto inserimento del cavo

Istruzioni di sicurezza








 ATTENZIONE	
	<ul style="list-style-type: none">Bambini sotto i 12 anni non possono usare la poltronaConsultare un medico se non ci si sente bene prima di usare la poltrona,Prima di staccare la presa di corrente, posizionare l'interruttore su off;
	<p>Prima di movimentare pediera e/o schienale assicurarsi che non ci sia</p> <ul style="list-style-type: none">nessun oggetto, animale o persona intorno alla poltrona o sotto di essa;
	<ul style="list-style-type: none">Fare attenzione che il carrello del massaggio sulla schiena non arrivi a massaggiare la testa;
	<ul style="list-style-type: none">Prima dell'utilizzo assicurarsi che il tessuto della poltrona sia integro e non danneggiato, in caso spegnere la poltrona e ripararlo;
	<ul style="list-style-type: none">I bambini sotto i 12 anni non possono usare la poltrona
	<ul style="list-style-type: none">Non utilizzare la poltrona se il filo elettrico è rotto o danneggiato
	<ul style="list-style-type: none">In caso d'incendio spegnere la poltrona e staccare la presa dalla corrente

Istruzioni di sicurezza

 ATTENZIONE	
	<ul style="list-style-type: none">Non tirare, arrotolare o allungare il cavo elettrico che alimenta la poltrona, nè porre pesi su di esso.
	<ul style="list-style-type: none">E' proibito apportare da soli modifiche o riparazioni alla poltrona. In caso di rottura rivolgersi al venditore.
	<ul style="list-style-type: none">In caso di danneggiamento del cavo elettrico di alimentazione rivolgersi al venditore


 CAUTELA	
	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare la poltrona solamente se posizionata sopra un pavimento piatto
	<ul style="list-style-type: none">Controllare la regolare posizione delle sfere massaggianti prima dell'utilizzo.
	<ul style="list-style-type: none">Si suggerisce di massaggiarsi al massimo 15minuti e non più di 5 minuti su una singola posizione. E' consigliato iniziare con un massaggio leggero. Massaggiare per lungo tempo una zona può creare disturbi.
	<ul style="list-style-type: none">Al termine dell'utilizzo spegnere l'interruttore
	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare presa con messa a terra
	
	<ul style="list-style-type: none">Non premere sui rulli massaggianti con le maniNon mettere le mani fra i rulliNon mettere mani o piedi fra le parti meccanicheNon sostare dietro lo schienale o sotto la pedieraNon muovere la poltrona mentre è in funzioneNon inserire mani o testa sotto la pedieraNon usare la poltrona se s'indossano bigodini o fermagli per capelliNon usare la poltrona avendo oggetti nelle tascheNon togliere la corrente durante il funzionamento


Istruzioni di sicurezza

<div> CAUTELA</div>	
	Non dormire mentre si utilizza la poltrona Non usare la poltrona in stato di alterazione psicofisica o ubriachezza
	Non versare acqua o sporcare la presa di corrente per evitare cortocircuiti
	Non usare la poltrona in combinazione con apparati elettrici riscaldanti come ad esempio termocoperte, potrebbero verificarsi cortocircuiti Non lasciar cadere oggetti nelle fessure o cavità della poltrona
	Non lasciare la poltrona esposta alla luce diretta del sole o a fonti di calore al fine di non rovinare il rivestimento;
	 Non utilizzare o conservare la poltrona in luoghi umidi, ma in luoghi asciutti. Non toccare l'alimentazione con mani bagnate;
	Spegnere l'interruttore immediatamente in caso di mancanza di corrente
	Non tirare la presa dal filo per staccarla ma tirare dalla presa direttamente
	Non toccare il cavo di alimentazione e la presa con le mani bagnate
 Pulizia	Per la pulizia evitare i detergenti chimici, pulire con un panno asciutto. In caso di polvere o sporco usare un panno con acqua calda o detergente neutro, quindi asciugare. Non usare alcohol o detergenti chimici.
 Terra e Fusibile	Assicurarsi che spina della poltrona sia collegata ad una presa dotata di messa a terra. La poltrona è dotata di spina con messa a terra.
	In caso di rottura del fusibile: staccare la corrente e scollegare la presa, svitare il coperchio del fusibile e sostituirlo.
<div></div>	

INSTALLAZIONE


1 APRIRE LA SCATOLA ED ESTRARRE LA POLTRONA.
Tagliare le stringhe con un coltello ed estrarre dalla scatola tutti gli accessori poi la poltrona. Eseguire questa operazione in almeno 2 persone.

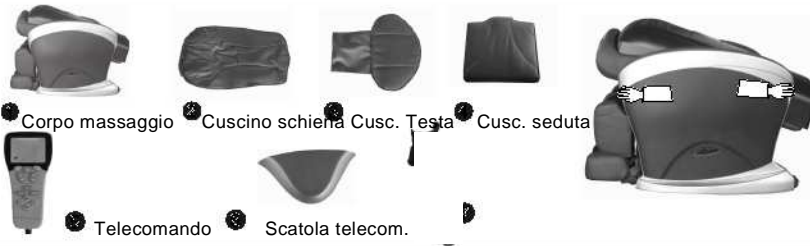



Prima di sollevare lo schienale togliere il telecomando dalla seduta per evitare di romperlo. Sollevare lo schienale fino a 110° e fino ad udire un click: ora è in posizione normale

Collegare i tubi per l'aria nel cuscino seduta con quelli che escono dal telaio della poltrona. Il tubo senza fascetta che esce dal telaio va collegato al connettore a T, l'altro al connettore dritto. Collegare con il velcro il cuscino al telaio della poltrona.

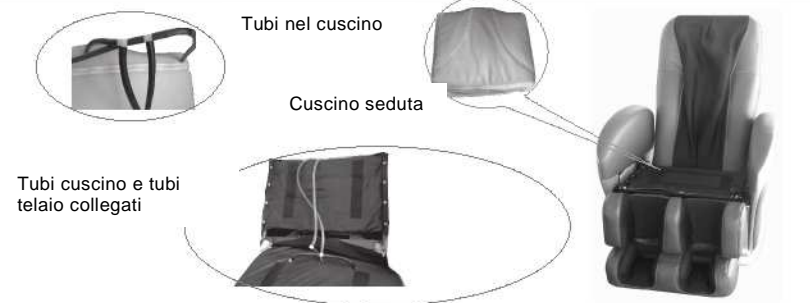


INSTALLAZIONE

Connettere il cuscino testiera con il cuscino schienale

Connettere i cuscini con il velcro

schienale

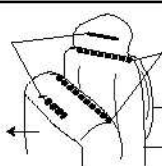



Attacco cuscini testiera e cuscini schienale con zip



INSTALLAZIONE SCATOLA PORTA TELECOMANDO
POLTRONA DAFNE: Estrarre la scatola ed inserirla sul bracciolo dx

- Prima di accendere la poltrona assicurarsi:
- che non ci siano oggetti davanti e dietro la poltrona;
 - che ci siano almeno 40 cm di spazio disponibile per poter reclinare lo schienale
 - che non ci siano fessure tra i cuscini;
 - che il cavo elettrico e la presa sulla poltrona non siano danneggiati;
 - che il voltaggio sia conforme alle specifiche della poltrona;

Portare quindi l'interruttore sul retro della poltrona nella posizione 1 per accenderla, una volta terminato l'utilizzo portarlo in posizione 0 per spegnerla. Nei momenti di inutilizzo tenere l'interruttore in posizione 0 ossia spento.

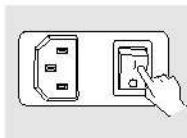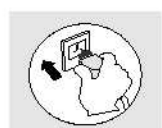

6


DENOMINAZIONE PARTI DELLA STRUTTURA

MODELLO DAFNE




7

TELECOMANDO CHIUSO

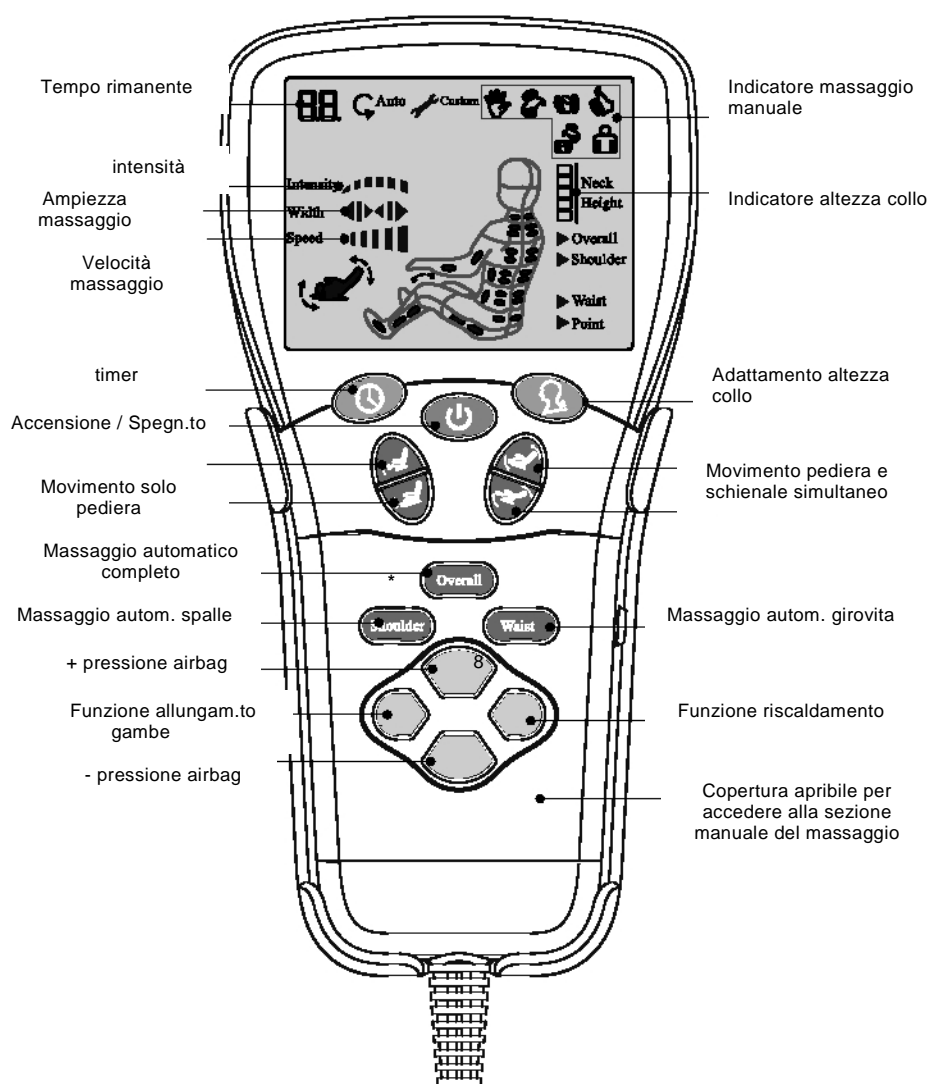

8

TELECOMANDO APERTO

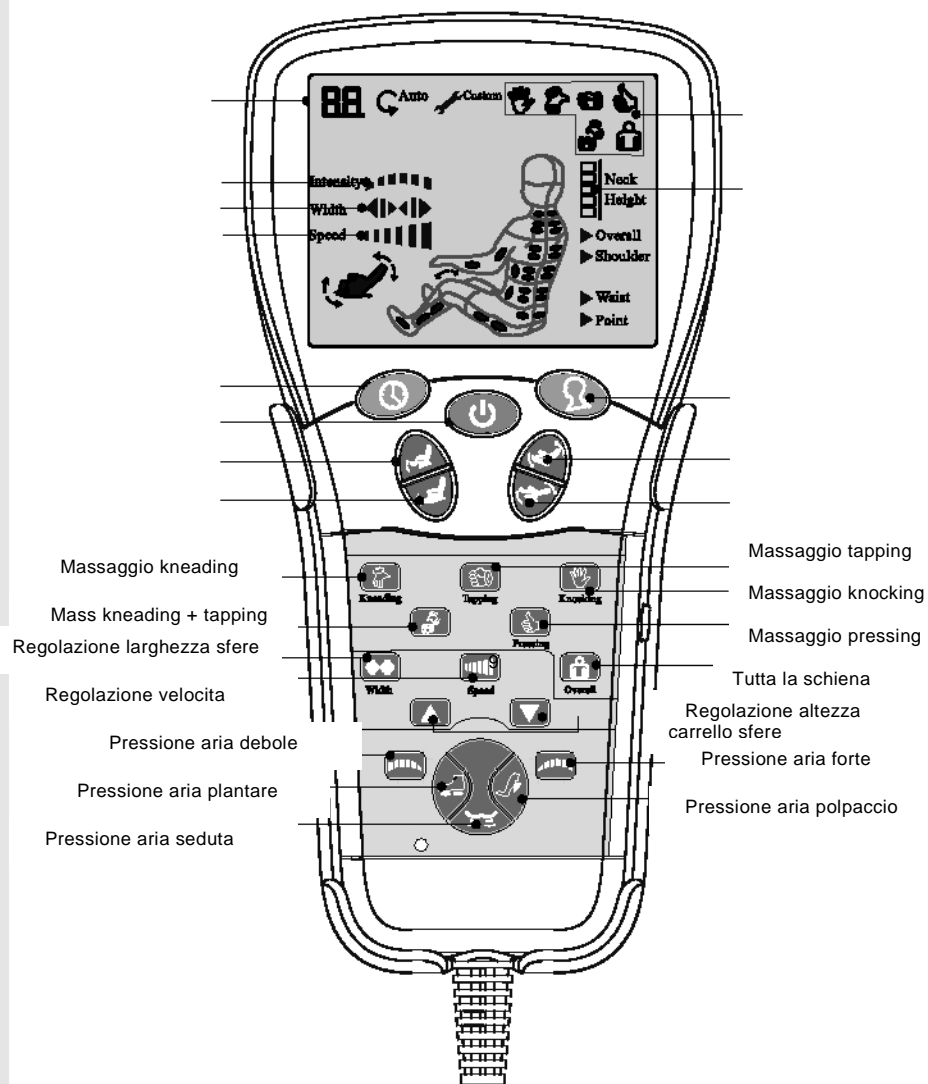

9

ISTRUZIONI TELECOMANDO

- Tutte le funzioni della poltrona posso essere comandate tramite il telecomando, assicurarsi che il terreno vicino alla poltrona sia sgombro prima dell'uso;
- Se l'operazione selezionata è corretta, l'apparecchio emetterà un suono tipo beep, in caso contrario non verrà emesso nessuno rumore;



- **Pulsante accensione / spegnimento.** All'accensione lo schienale andrà indietro e la pediera salirà fino a formare un angolo confortevole e il tempo di massaggio predefinito sarà di 15 minuti (è possibile modificarlo premendo il tasto time). Allo spegnimento o allo scadere del tempo la poltrona tornerà in posizione normale e il telecomando si spegnerà entro 10 secondi.



- **Pulsante altezza carrello massaggio:** permette di regolare l'altezza massima dell'carrello di massaggio posto nello schienale: ci sono 5 posizioni selezionabili.



- **Pulsante altezza carrello massaggio:** permette di regolare l'altezza massima dell'carrello di massaggio posto nello schienale: ci sono 5 posizioni selezionabili.



- **MOVIMENTO PEDIERA E SCHIENALE**
Tenere premuto per far alzare la pediera, rilasciare il pulsante per fermarla.

- Tenere premuto per far abbassare la pediera, rilasciare il pulsante per fermarla



- Tenere premuto per far alzare la pediera e abbassare lo schienale simultaneamente, rilasciare il pulsante per fermare il movimento.

- Tenere premuto per far abbassare la pediera e alzare lo schienale simultaneamente, rilasciare il pulsante per fermare il movimento.




- **FUNZIONE MASSAGGIO AUTOMATICO** (solo a telecomando chiuso)
 - Massaggio automatico su tutta la schiena;
 - Massaggio automatico sulle spalle
 - Massaggio automatico sulla parte bassa della schiena;Da questo momento è possibile usare la funzione di stretching delle gambe e la pressoterapia



- **PRESSOTERAPIA** (utilizzabile in modalità automatica e manuale)
 - premere HEAT per utilizzare la funzione di riscaldamento: funziona sia sul piede che sulla seduta
 - premere STRETCH per attivare o interrompere il ciclo di distensione delle gambe /gonfiamento airbags
 - INTENSITY +/-: pulsanti che regolano le 3 pressioni disponibili degli airbags (intensità visibile sullo schermo del telecomando)

ISTRUZIONI TELECOMANDO

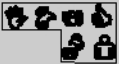

- **FUNZIONI MASSAGGIO MANUALE** (solo con telecomando aperto)
Selezionare uno dei 5 tasti per avere il massaggio corrispondente: kneading, tapping, pressing, kneading+tapping, knocking. Sul display sarà visualizzabile il tipo di massaggio che la macchina stà eseguendo.



- **KNEADING** massaggio avvolgente per rilassare i muscoli affaticati.



- **TAPPING** imita il massaggio effettuato con colpi di pugno



- **KNOCKING** imita il massaggio effettuato con i palmi delle mani



- **KNEADING + TAPPING** combinazione dei 2 massaggi



- **PRESSING** imita il massaggio presso terapico effettuato con i polpastrelli



- **MASSAGGIO COMPLETO:** fa scorrere il carrello massaggiante lungo tutta la schiena utilizzando tutti i 5 massaggi disponibili



- **VELOCITA' MASSAGGIO:** permette di scegliere fra 3 velocità di massaggio, sul display viene visualizzata la velocità scelta



- **LARGHEZZA SFERE:** si possono scegliere 3 differenti larghezze delle sfere: 18/14/10 cm per i massaggi TAPPING, PRESSING E KNOCKING



- **REGOLAZIONE CARRELLO SFERE:** è possibile fissare il carrello del massaggio in un solo punto, tenendolo premuto si fa scorrere il carrello in alto o in basso



REGOLAZIONI AIRBAGS

- SEAT: premere per avere pressoterapia sulla seduta
- LEGREST: premere per avere la pressoterapia sulle gambe
- FOOT: premere per avere la pressoterapia sul piede



- Per regolare le 3 intensità disponibili di pressione utilizzare il primo pulsante per incrementarla e il secondo per diminuirla

INTRODUZIONE DELLE ISTRUZIONE OPERATIVE

Dopo aver acceso l'interruttore posto alla base della poltrona, il carrello con le sfere si posiziona in alto sullo schienale in caso non fosse già al suo posto. Anche la pediera si posizionerà verso il basso all'atto dell'attivazione dell'interruttore.






Alla pressione del pulsante di accensione/spegnimento si avrà che lo schienale scenderà indietro e la pediera si alzerà fino a formare un angolo confortevole. Il tempo di massaggio si attesterà automaticamente a 15 minuti.

Premere poi i pulsanti per scegliere il tipo di massaggio migliore e variare il tempo di operatività. Se si gradisce un massaggio più forte togliere il cuscino per la testa o anche quello per la schiena.

MASSAGGIO AUTOMATICO

Adatto per le persone che vogliono massaggiare tutto il corpo provando tutti i tipi di massaggio e le varie intensità.

MASSAGGIO MANUALE (aprire il telecomando), permette di scegliere il tipo di massaggio e la zona da massaggiare.

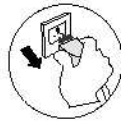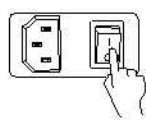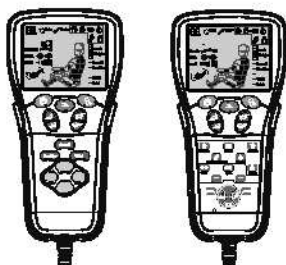

Per terminare il massaggio: attendere lo scadere del tempo o premere il pulsante di accensione sul telecomando. Le sfere massaggianti, pediera e schienale torneranno in posizione normale. Solo allora spegnere la poltrona utilizzando l'interruttore posto alla base della stessa.

MOVIMENTAZIONE

La poltrona può essere spostata utilizzando le ruote. Spingere verso il basso la parte alta dello schienale (precedentemente messo in posizione 90° rispetto alla seduta). Oppure alzare la pediera e fare leva su questa per spostare la poltrona. Lo spostamento con le ruote va fatto su una superficie piana. Le ruote non sono adatte agli scalini.



- Prima di spostare la poltrona rimuovere il cavo elettrico e ripiegare sulla seduta,
- Muovere la poltrona lentamente al fine di evitare danneggiamenti,
- Non usare le rotelle su terreni non piani o sconnessi,
- Non usare le rotelle su pavimenti in legno,
- In caso di spostamento senza ruote sollevare la poltrona in 2 persone,

- Non utilizzare la poltrona in luoghi umidi come bagni o saune;
- Posizionarla in luogo pianeggiante;
- Assicurarsi di avere 40 cm di spazio vuoto dietro lo schienale;
- Non utilizzare la poltrona in luoghi con alte temperature o alla luce diretta del sole per evitare danni al rivestimento,
- Per ridurre al minimo il rischio di graffi al pavimento e la rumorosità della poltrona è consigliabile posizionare un tappeto sotto la stessa.



DOMANDE FREQUENTI E SOLUZIONE PROBLEMI

problema	ragione	soluzione
Il massaggio non funziona dopo avere acceso la poltrona	Il cavo non è inserito	- inserirlo
	L'interruttore è spento	- accenderlo
	La spina o il cavo sono rotti	- farli riparare da un elettricista qualificato
	I fusibili sono saltati	- farli sostituire da una persona qualificata: elettricista o produttore
Il carrello non si muove e sul display appare errore E1	Problemi ai circuiti interni	- contattare il rivenditore
	Troppo peso sul carrello	- ridurre il peso, spegnere per 10 secondi e riaccendere
	Struttura interna danneggiata	- contattare il rivenditore
	Tessuto danneggiato	- contattare il rivenditore
Errore E2 sul display	- problemi con il movimento kneading	- contattare il rivenditore
Errore E3 sul display	- problemi con il movimento Tapping	- contattare il rivenditore
Troppo rumore	- abrasioni dovute al prolungato utilizzo	- contattare il rivenditore
Riscaldamento eccessivo del telecomando	-	- contattare il rivenditore
Riscaldamento eccessivo del cavo e dell'interruttore	-	- contattare il rivenditore




Problemi non riconducibili alle cause sopra: togliere la corrente e contattare il rivenditore

PARAMETRI TECNICI

Modello Dafne
Peso netto 71 kg
AC 220 V
50 HZ
Peso lordo 83 kg
Dimensioni imballo 120 x 77 x 77 cm
Classe sicurezza I classe

14

SCHEMA PARTI MECCANICHE

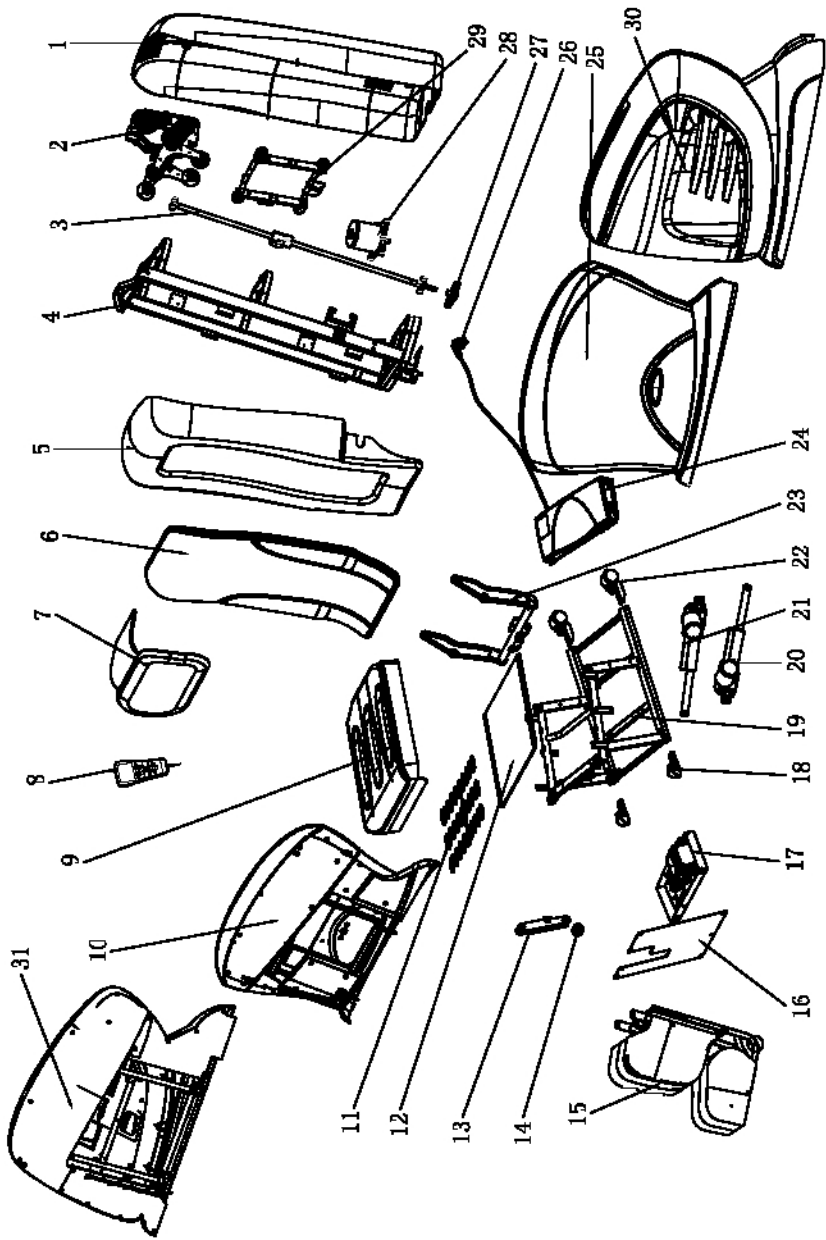

15

LISTA PARTI MECCANICHE

Mechanical parts list

- 1 – copertura schienale – 1 pezzo
- 2 – macchina massaggiante – 1 pezzo
- 3 – vite senza fine – 1 pezzo
- 4 – telaio posteriore massaggio schienale – 1 pezzo
- 5 – telaio anteriore massaggio schienale – 1 pezzo
- 6 – cuscino posteriore – 1 pezzo
- 7 – cuscino testiera – 1 pezzo
- 8 – telecomando – 1 pezzo
- 9 – cuscino seduta – 1 pezzo
- 10 – bracciolo dx – 1 pezzo
- 11- molla – 1 pezzo
- 12 – tessuto seduta – 1 pezzo
- 13 – piastra connessione pediera – 1 pezzo
- 14 – sfera – 1 pezzo
- 15 – pediera – 1 pezzo
- 16 – copertura frontale pediera – 1 pezzo
- 17 – pompa d'aria – 1 pezzo
- 18 – tappeto pediera frontale – 1 pezzo
- 19 – telaio seduta – 1 pezzo
- 20 – motore schienale – 1 pezzo
- 21 – motore pediera – 1 pezzo
- 22 – ruota posteriore – 2 pezzi
- 23 – telaio per schienale – 1 pezzo
- 24 – power box – 1 pezzo
- 25 – bracciolo sinistro – 1 pezzo